

Comfort Digisystem auf der Arbeit - Set 2

DM90 + DM05 + DC20 + TeleLink



Microphone DM90



Microphone DM05



Conference Microphone DC20 + TeleLink



Comfort Digisystem auf der Arbeit - Set 2 ist für berufstätige Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gedacht, die am Arbeitsplatz uneingeschränkt kommunizieren wollen: bei Meetings, am Festnetztelefon oder mit dem Handy.

Deutlich Verstehen bei allen Besprechungen

Mit dem Comfort Digisystem Arbeits-Set 2 lösen Sie auch schwierige Hörsituationen, die im Laufe eines Arbeitstages auftreten können: größere oder kleinere Meetings, Telefonieren mit dem Handy oder dem Festnetztelefon. Auch Telefon- oder Videokonferenzen sind kein Problem.

Das vielseitige Conference Microphone DC20 wird auf den Tisch gestellt und nimmt die Stimmen der Teilnehmer effektiv auf. Es kompensiert automatisch den Abstand zu den Sprechenden. Die Sprachsignale werden so bearbeitet, dass die Stimmen hervorgehoben und Hintergrundgeräusche unterdrückt werden. Dies ermöglicht ein deutliches Sprachverstehen.

Bei größeren Meetings und Vorlesungen lässt sich das Konferenzmikrofon durch das Referentemikrofon DM05 ergänzen.


Telefonieren im Festnetz

TeleLink wird zusammen mit dem Conference Microphone DC20 an das Festnetztelefon angeschlossen. Die Stimme des Gesprächspartners wird vom DC20 über den Empfänger in das Hörsystem/Implantat übertragen.

Telefonieren mit dem Handy


Das Microphone DM90 ist eine benutzerfreundliche Lösung für sämtliche mit Bluetooth ausgestatteten Geräte, wie z.B. Mobiltelefone, Schnurlostelefone, Computer, Laptop, Tablets usw. und ermöglicht eine einfache Nutzung ihres Mobiltelefons.

Bei einem eingehenden Anruf hören Sie das Klingeln des Mobiltelefons direkt über Ihre Hörsysteme, können mit nur einem Tastendruck das Gespräch annehmen und sind sofort mit Ihrem Anrufpartner verbunden.

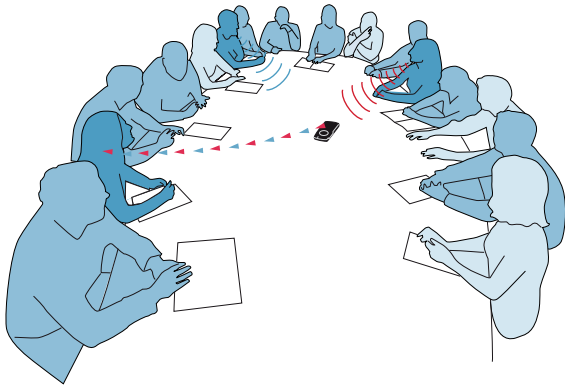


DC20 + DM90

Das Konferenzmikrofon nimmt die Stimmen sämtlicher Teilnehmer auf und sendet sie an den Empfänger der Person mit Hörbeeinträchtigung weiter.

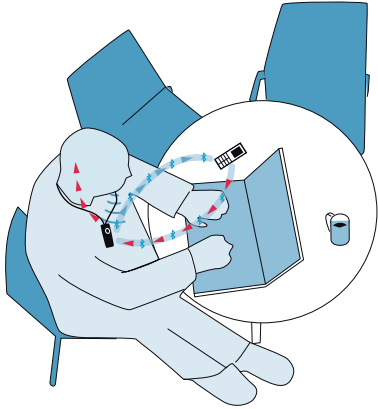


DM90

Das Handy wird über Bluetooth mit dem Microphone DM90 verbunden. Die Stimme des Gesprächspartners wird vom DM90 über eine Induktionsschleife in das Hörsystem/Implantat übertragen.

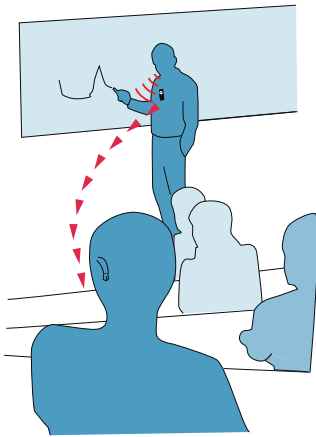

DM05 + DM90

Mit dem Microphone DM05 kann man einen Vortragenden auf eine Distanz von bis zu 30 m hören.

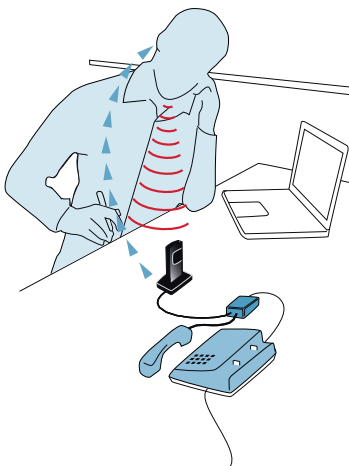

DC20 + TeleLink + DM90

TeleLink wird zusammen mit dem Conference Microphone DC20 an das Festnetztelefon angeschlossen. Die Stimme des Gesprächspartners wird vom DC20 über den Empfänger in das Hörsystem/Implantat übertragen.