

Comfort Digisystem produktinformasjon

Handset DH-10



Mottaker med krystallklar lyd

Handset DH-10

Handset DH-10 er en liten, moderne mottaker med attraktivt design og integrert halsslynge som kan brukes sammen med alle Digisystem mikrofoner.

Halsslyngen overfører lyden induktivt til høreapparatet når dette er stilt i T-posisjon. Alternativt kan man tilkoble ørepropper, hodetelefoner eller et annet utstyr. Når hode-telefonuttaket er i bruk, stenges halsslyngen automatisk av og da fungerer den som et halsbånd.

Styrken og menyfunksjoner justeres enkelt med diskrete knapper på enhetens langsiden. Det er lett å komme til disse knappene.

Som tilbehør finnes det halsslynger i forskjellige lengder.



Unike egenskaper

SST (Secure Stream Technology) – Digital lydoverføring

Den unike digitale overføringen av lyden mellom senderen og mottakeren, SST, eliminerer all overføringsstøy. Transmisjonen fra sender til mottaker er dessuten kodet, noe som gjør den helt avlyttingssikker – ingen andre kan høre hva som blir sagt. I motsetning til andre krypterte radiosystemer overføres lyden helt krystallklart og uten tidsforsinkelser.

FFC – Free Frequency Check

I enhetens meny vises det med en indikering ved respektive kanal hvilke frekvenser som man kan bruke der hvor enheten er plassert.



Comfort Audio
HEAR THE FUTURE

Tekniske egenskaper

Handset DH-10

Generelt

Størrelse: 74 x 39 x 13 mm

Vekt: 35 g

Spesialfunksjoner

Balanse (hodetelefontuttak): Menystyrt

Fast styrke: Det er mulig å stille inn fast styrke. Styrkekontrollen deaktiveres.

Maks styrke: Mulighet for å stille inn maksimal styrke. Styrkekontrollen begrenses.

PIN-kode: Valgte funksjoner kan låses med kode.

Grensesnitt

Display: Farge

Meny: Intuitiv og brukervennlig meny med automatisk energisparingsposisjon.

Menyspråk: Svensk, Engelsk, Norsk, Dansk

Funksjonsindikator: Lett å lese flerfarget statusinformasjon

Manual: USB samt

www.comfortaudio.com

Drift

Batteri: Oppladbart Li-Polymer

Driftstid: Opp til 10 timer

Lading: Overladningsbeskyttelse samt automatisk vedlikeholdslading.

Ladetid: Ca 2 timer. 90% etter 1 time.

Kan lades opp mens enheten er i bruk.

Radioegenskaper

SST: SecureStream Technology - FSK, kryptert streamet digital radio

FFC: Free Frequency Check - i enhetens meny vises det med en indikering ved respektive kanal hvilke frekvenser som kan brukes der for enheten er plassert.

Frekvensområde mottaker: 768 - 872 MHz

Systemrekkevidde: ca 30 m

Tekniske spesifikasjoner

Type mottaker: SST


Antenne: Innebygd

Tilkoblinger: Halssløyge, hodetelefon/ørepropper


Funksjoner




Bruk

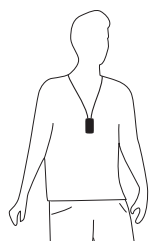


Med høreapparat (halssløyge)

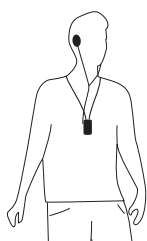

Med hodetelefon u. bøyde

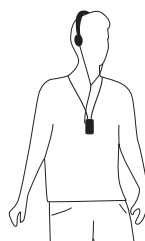

Med hodetelefon m. bøyde

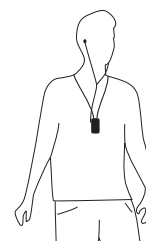

Med ørepropper